

Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se registrará de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.

Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:



- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: Dispositivo multifuncional para el cuidado de la piel
Marca: Master®
Modelo: MH-MULTIBEAUTY

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya discontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



Instrucciones de uso
Dispositivo multifuncional para el cuidado de la piel
MH-MULTIBEAUTY



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

El dispositivo para el cuidado de la piel es ideal para las terapias diarias, auxiliar en el rejuvenecimiento y tonificación de la piel, aclarado facial, eliminación de arrugas antiedad, renovación de piel y aumento de elasticidad con las diferentes terapias que tiene como PHOTON, RF&EMS, ULTRASONIC, VIBRATION, POSITIVE ION, NEGATIVE ION, proporcionando un ligero calor, cómodo y relajante durante el tratamiento de 10 minutos donde usted obtiene favorables resultados en la piel.

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de usar el producto.

1. En caso de presentar defecto de fábrica, póngase en contacto con un distribuidor autorizado.
2. No utilice el dispositivo en condiciones de altas temperaturas o de humedad (baño, piscina, etc.)
3. No mire las luces cuando se encuentre en funcionamiento.
4. Para transportar el equipo por favor utilice el empaque original para evitar daños al mismo.
5. Personas sensibles de la piel no se recomienda el uso.
6. Mujeres embarazadas y las personas con hipertensión, enfermedades de corazón no se recomienda su uso.
7. Se debe asegurar que los niños no utilicen el producto como juguete.
8. El producto no debe ser utilizado por personas con capacidades diferentes o problemas mentales o sensoriales a menos que una persona responsable de su seguridad lo supervise y/o capacite.
9. Antes de comenzar a utilizar el equipo deberá recargar la batería en su totalidad para su correcto funcionamiento
10. En caso de no utilizar el equipo por tiempo prolongado, se recomienda realizar una recarga cada mes

Especificaciones


MH-MULTIBEAUTY

Alimentación: 5 Vcc
Tiempo de carga: 3 horas
Tiempo de trabajo: 10 minutos
Frecuencia de vibración: 8 600 rpm
Tiempo de espera: 40 días
Dimensiones: 165x45x46 mm
Peso: 298 g

CARGADOR

Voltaje de entrada: 5 Vcc
Voltaje de salida: 5 Vcc
Potencia de carga: 2.5W

Partes

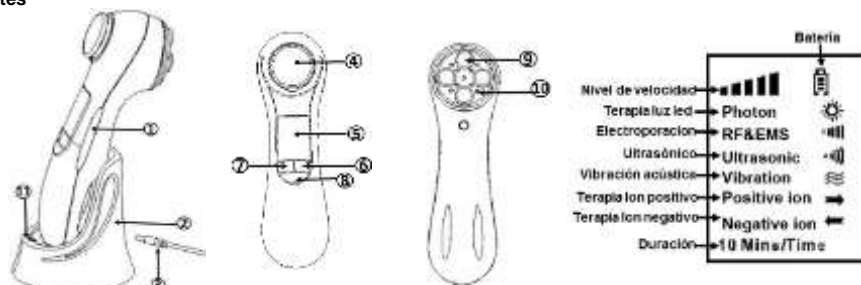

1. Mango con tira metálica.
2. Cargador.
3. Cable USB.
4. Placa circular de Ion ultrasónico.
5. Pantalla LCD.
6. Botón de intensidad (H/L).
7. Botón de selección (MODE).
8. Encendido /apagado (POWER).
9. 2 pares de puntas eléctrico bipolares.
- 10 LED.
11. Indicador de luz de carga.

Recarga de batería

- 1) Coloque el aparato sobre el cargador.
- 2) Conecte el cable con el conector 2.1 al aparato, y el conector USB conéctelo a cualquier equipo con entrada USB para comenzar la carga.
- 3) Encenderá el indicador de color rojo.
- 4) En la pantalla LCD, el icono de batería comenzara a parpadear esto indica que la batería se está cargando.
- 5) Cuando deje de parpadear el icono de la batería en la pantalla LCD significa que la batería está completamente cargada.

Antes de usar

- 1) Utilice crema a base de agua o gel para la piel.
- 2) Limpie el área de la piel con agua y un paño donde se realizará el tratamiento.
- 3) La terapia debe ser de menor intensidad alrededor de los ojos.



Modo de operación

- 1) Desconecte el dispositivo del cargador y presione durante 2 segundos el botón encendido/apagado (8).
- 2) Presione el botón "mode" durante 2 segundos para entrar al menú de selección de función.
- 3) Presione el botón mode (7), en la pantalla LCD parpadeara el icono que haya seleccionado
- 4) Presione la tecla "H/L" (6) para ajusta la velocidad o la intensidad comience del nivel 1 hacia el nivel 5 hasta que la piel se caliente ligeramente.
- 5) Presione el botón Mode (7) por 2 segundos para confirmar la función y el uso por 10 minutos.
- 6) Mueva ligeramente haciendo pequeños círculos durante el tratamiento.
- 7) 10 segundos después de haber terminado la sesión, el modo de función de memoria automática se activará para la siguiente sesión.
- 8) Al finalizar la sesión coloque el dispositivo en la base.

Terapias

Photon

La fototerapia se realiza por medio de 9 LED de luz constante que es adecuada para las sesiones diarias, cada color tiene una longitud de onda que ayuda a dar las sesiones sin dañar la piel y eliminar bacterias.

Modo photon red

Presione el botón "H/L" se encenderá una luz roja, donde la longitud de onda es 620 nm y sirve para la regeneración del colágeno mejorando la elasticidad de la piel.

Modo photon Green

Presione el botón "H/L" se encenderá una luz verde, con una longitud de onda de 520 nm que trabaja directamente con la pigmentación, el color, las pecas, los puntos del sol y los puntos viejos de la edad, puede reducir la pigmentación existente, mejorar el color de la piel. El pigmento negro crece en la parte inferior de la epidermis, la luz verde puede eliminar la producción excesiva de melanina y evitar el crecimiento de dicho pigmento en la piel.

Modo photon blue

Presione el botón "H/L" se encenderá una luz azul con longitud de onda de 465 nm funciona como antiinflamatorio, limpia los poros de la piel de grasa, elimina bacterias, ayuda a la circulación de sangre, penetrar a 0.25 mm debajo de la piel, ayudando a disminuir el acné.

Modo photon Orange

Presione el botón "H/L" se encenderá una luz naranja con longitud de onda de 590 nm luz caliente que trabaja con piel pálida o con manchas, se utiliza para estimular el sistema linfático y nervioso, el sistema inmunológico, relaja y restaura la piel sensible.

Modo photon Pink

Presione el botón "H/L" encenderá una luz rosa con longitud de onda de 700 nm mejora la circulación de sangre, fortalece la absorción de contenidos de belleza y aclara la piel, se recomienda el uso para piel oscura.

Modo photon Pink flash

Presione el botón "H/L" comenzara a destellar en color rosa para la absorción de gel o esencias sobre la piel.

Terapias

RF

La terapia de RF trasmite la energía electromagnética y actúa directamente sobre la piel a alta frecuencia proporcionando masaje para estimular la regeneración del colágeno, levantar y rellenar las arrugas, auxiliar para el desvanecimiento de cicatrices, mejorando la elasticidad y brillo de la piel.

EMS

Actúa directamente sobre la piel bajo la función de electroshock, ayuda a dar masaje y a reducir la celulitis.

Vibration

Las principales funciones es promover la circulación sanguínea, acelera el metabolismo, bajo la función de 8 500 vibraciones por minuto que limpia residuos de aceite en la piel.

Ultrasonic

Realiza micro masajes con vibraciones ayudando a suavizar el tejido de la piel, así como estimular el sistema nervioso y la función celular, mejora la circulación sanguínea y linfática local, fortalece la permeabilidad celular, mejora el metabolismo del tejido y la regeneración, suaviza los tejidos, estimula el sistema nervioso y la función celular, piel brillante y elástica.

Positive Ion

Realiza micro terapias por medio de Ion positivo conduce hacia afuera y reduce sustancias dañinas.

Negative Ion

Realiza micro terapias por medio de iones negativos funcionan directamente en piel para la absorción de nutrientes.